


Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie



In questa breve guida spiegherò come scaricare i dati del telecomando AVIVA direttamente sulla piattaforma DIASEND.



Ovviamente dò per scontato che abbiate già utilizzato la piattaforma DIASEND con altri dispositivi e quindi che siate già registrati.

Collegate il dispositivo ACCU-CHEK smart pix al vostro pc (lato usb), si aprirà una pagina che andremo subito a chiudere (i file contenuti all'interno del dispositivo sono per un programma che non andremo ad usare).

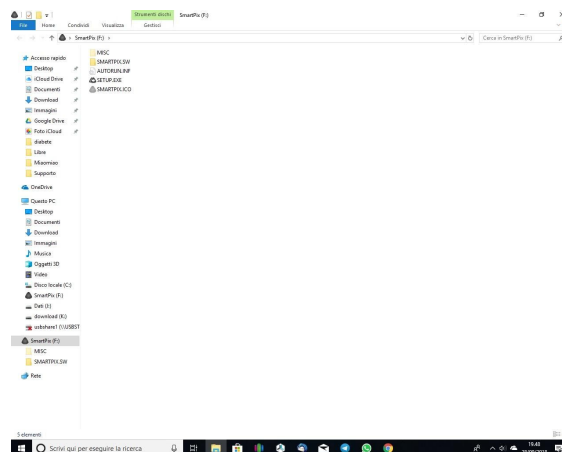

Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie

Collegate il telecomando AVIVA all'altra estremità del cavo (lato microusb), si accenderà il telecomando e sceglieremo " connessi al pc " e premete ok.

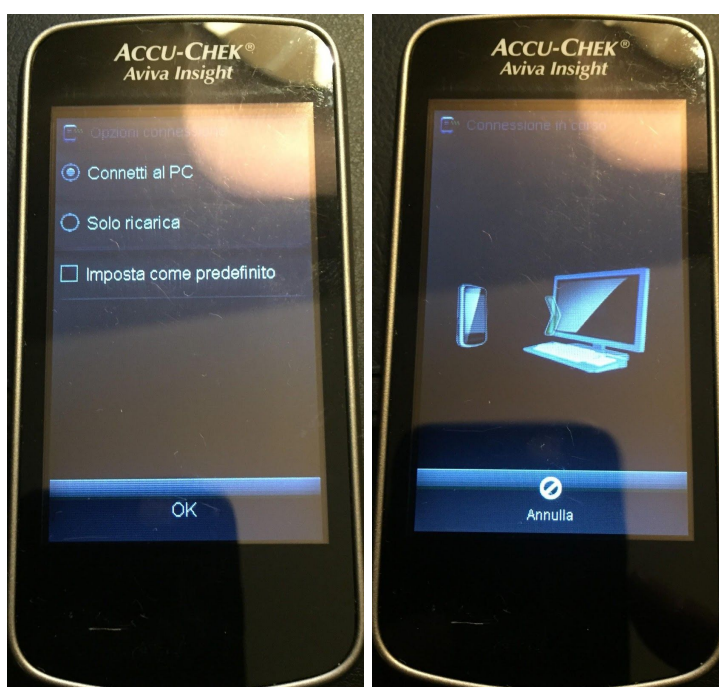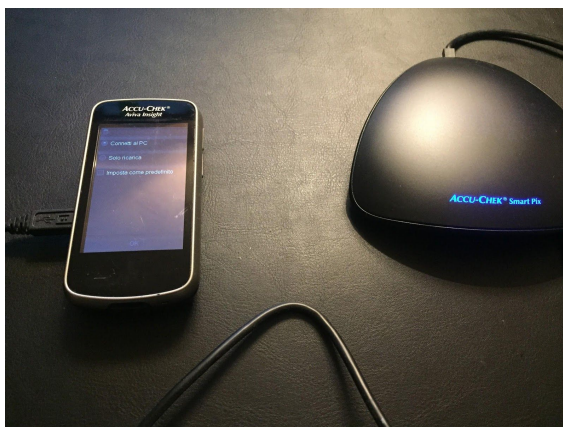

Adesso aprite il programma diasend, noterete che la spunta sulla voce " collegare il cavo al pc " è già spuntata ma la seconda voce, collegare il dispositivo , no.

Noterete che la lente girerà a vuoto ma non preoccupatevi, dopo qualche minuto il telecomando AVIVA si fermerà confermandovi l'avvenuto trasferimento dei dati e poi si spegnerà da solo.

Solo per la prima volta che adopererete un nuovo dispositivo per il caricamento dei dati sulla piattaforma DIASEND verrà chiesta la conferma dei dati di registrazione a tutela del paziente.

Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie

Solo a questo punto vedrete il caricamento dei dati sulla videata DIASEND e l'avvenuta conferma del passaggio sulla piattaforma online.

The image displays three sequential screenshots of the 'diasend® Uploader 3.2' software interface, illustrating the process of connecting a device and uploading data.

- Left Screenshot: RICERCA DEL DISPOSITIVO**
The interface shows a magnifying glass icon and a list of instructions:
 1. Collegare il cavo al computer.
 2. Collegare il dispositivo.
- Middle Screenshot: RICERCA DEL DISPOSITIVO**
The device 'Smart Pix' is found. A progress bar shows 0% completion. The text 'Dispositivo rilevato!' is displayed. An 'Annulla' button is visible at the bottom.
- Right Screenshot: CARICAMENTO DATI IN CORSO**
The data upload for 'Smart Pix' is complete. A green progress bar shows 100% completion. A green checkmark is displayed. The text 'Riuscita!' is shown, followed by the instruction 'Scollegare il dispositivo dal computer.' Two buttons are visible: 'Caricare un altro' and 'Visualizzare dati'.

Each screenshot includes a footer with an information icon and the copyright notice '©2018 Glooko Inc.'.